


PORTFOLIO PRODUKTÓW 2015/2016

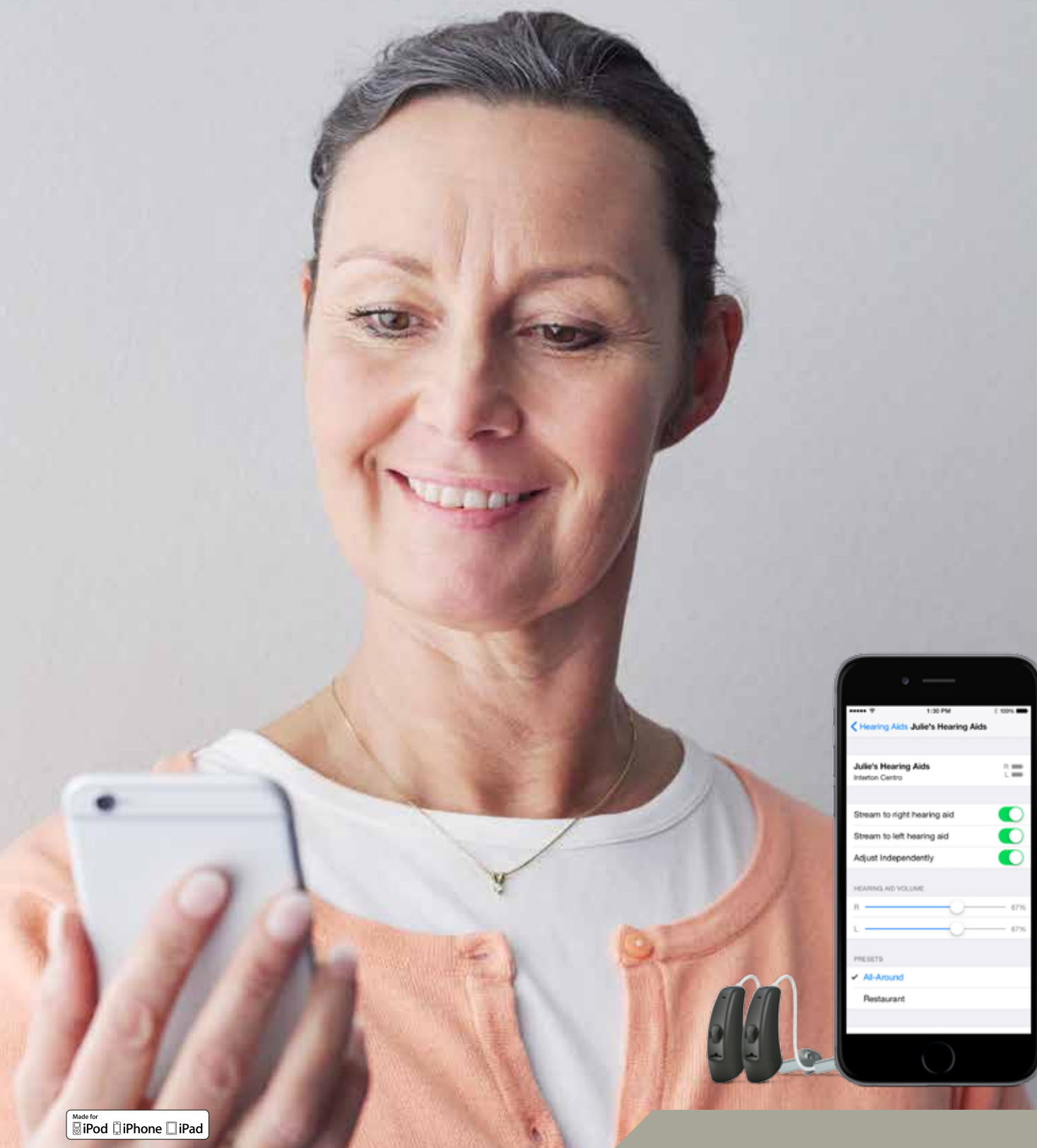

Nowe Produkty 2015

INTERTON CENTRO – Dla życia w centrum wydarzeń

Nowy aparat słuchowy Interton Centro jest tak mały i dyskretny, że nikt go nie zauważy. Centro wypełniony jest nowoczesną technologią dającą doskonałą jakość dźwięku, w tym najlepsze opcje kierunkowości, wbudowany Menedżer aklimatyzacji i międzyszną komunikację. Na dodatek, Interton Centro Made for iPhone może być bezpośrednio sterowany za pomocą iPhone®, iPad® lub iPod touch® lub poprzez aplikację Interton EasyHearing dla telefonów z systemem Android.

W skrócie, Interton Centro daje klientom pewność siebie w życiu, bezstresnym życiu - w samym centrum wydarzeń.

Interton Portfolio

	Stylowe	Pełna rodzina	Super Power	Znane produkty
Premium	CENTRO 6*			
Zaawansowane	CENTRO 4	STEP 4		
Podstawowe		STEP 2	GAIN 3 GAIN 2	
Budżetowe		SHARE 1.3 SHARE 1.2 SHARE 1.1		STAGE

Bezprzewodowe
 Bezprzewodowość niedostępna

* Interton Centro 6 posiada bezpośrednią łączność z iPhone, iPod, iPad



Kontrola Interton Centro z iPhone®, iPad® lub iPod touch®

Twoi klienci mogą teraz przesyłać strumieniowo dźwięk z iPhone bezpośrednio do swoich aparatów słuchowych. Oznacza to, że użytkownicy bez trudu uzyskują dostęp do wszystkiego co oferuje ich telefon, czyli muzyki, rozmów FaceTime lub instrukcji GPS, a także regulacji głośności i zmiany programów bezpośrednio z iPhone. Wraz z Interton Klips Telefoniczny 2 i aplikacją Interton EasyHearing, użytkownicy telefonów z systemem Android mogą także regulować głośność i zmieniać programy w swoich aparatach słuchowych Interton Centro a także przesyłać dźwięk i muzykę.

Oznacza to, że Twoi Klienci otrzymują bezproblemową kontrolę swoich aparatów słuchowych i mogą cieszyć się dokładnie taką samą funkcjonalnością jak każdy inny - bezpośrednio w uszach.



ZMIANA PROGRAMÓW

Klienci mogą zmienić program, w zależności od środowiska, w którym się znajdują, np: w domu, w pracy lub w restauracji.



REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Klienci mogą zwiększyć lub zmniejszyć głośność dla ich komfortu.



OTRZYMYWANIE POLECEŃ GPS

Klienci mogą usłyszeć wskazówki dojazdu w czasie podróży.



WYKONYWANIE I ODBIERANIE POŁĄCZEŃ

Klienci mogą korzystać z FaceTime® lub Skype i pozostać w kontakcie z ludźmi.



PRZESYŁANIE DŹWIĘKU

Klienci mogą słuchać muzyki za pomocą preferowanej aplikacji, słuchać książki audio lub obejrzeć film.



Nano Powłoka

- zwiększona żywotność, mniej napraw

Wszystkie aparaty słuchowe Interton pokryte są Nano Warstwą, która tworzy ochronną powłokę na każdej części aparatu. Chroni zarówno zewnętrzną część jak i elektronikę wewnątrz przed wilgocią i kurzem. Nano Powłoka zapobiega korozji i znacznie poprawia niezawodność produktu, w rezultacie zmniejszając liczbę napraw i zwiększając zadowolenie klientów.



Appraise 2.3

- bezproblemowe, bezprzewodowe dopasowanie

Program Appraise oparty jest oparty na sprawdzonym przepływie informacji, czyniąc proces dopasowania prostym i zorganizowanym. Zaawansowany system filtrowania pokaże Ci tylko te urządzenia, które odpowiadają ubytkowi słuchu pacjenta. Interfejs programowy Interton Airlink, pozwoli Ci bezprzewodowo dopasować aparaty bez żadnych dodatkowych adapterów sprawiając, że proces regulacji będzie bardziej przyjemny dla Ciebie i Twoich klientów.



Kolor dla każdego

Aparaty słuchowe Interton dostępne są w kilku różnych kolorach, aby dopasować je do preferencji Twoich klientów.



Bezprzewodowe Akcesoria

Ciesz się mową i rozrywką całkowicie bezprzewodowo

Nasza druga generacja, wiodących w branży akcesoriów bezprzewodowych 2.4 GHz, pozwala klientom łączyć się z telefonem, telewizorem, komputerem lub wieżą stereo i odbierać mowę i dźwięki bezpośrednio w aparatach słuchowych bez pośrednich pętli lub stopek. To całkowicie bezprzewodowe połączenie pozwala cieszyć się filmami, muzyką, konwersacją telefoniczną i czyni codzienne życie przyjemniejszym.



INTERTON KIIPS TELEFONICZNY 2

Przekazuje dźwięk i muzykę bezpośrednio do aparatów słuchowych z telefonu z Bluetooth®. Użytkownicy Android korzystając z Klips Telefoniczny 2 mogą także kontrolować swoje aparaty słuchowe poprzez aplikację EasyHearing.



INTERTON TV STREAMER 2

Streamer typu "Plug&Play" z nowymi funkcjami, przesyła krystalicznie czysty dźwięk stereofoniczny z telewizorów, wież stereo, komputerów i innych urządzeń audio wprost do aparatów słuchowych. Nie wymaga zakładania na szyję pośrednich pętli lub stopek.



INTERTON PILOT 2

Umożliwia klientom kontrolowanie głośności, zmiany programów i urządzeń strumieniowych, takich jak TV Streamer 2 i Mini Mikrofon.



INTERTON MINI Mikrofon

Klienci mogą przypiąć mini mikrofon do ubrania członka rodziny lub przyjaciela i przesyłać mowę bezpośrednio do swoich aparatów słuchowych.

Indywidualne

Przegląd produktów



CIC/Power CIC



ITC/Power ITC



ITE/Power ITE

Zakres dopasowania	Częstotliwość		
	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000
2.4 GHz bezprzewodowość		opcja	opcja
Maks. wzm. (IEC 118-0) dB	52 ¹	60 ¹	66 ¹
Maks. wyj. (IEC 118-0) dB	125 ¹	127 ¹	136 ¹
Typ baterii	10A	312	13
Żywotność baterii (średnia) h	82	133 ²	242 ²
Przycisk zmiany programów		opcja	opcja
Regulator głośności		opcja ³	opcja ³
Dwa mikrofony		opcja ⁴	opcja ⁴
Cewka		opcja	opcja
STEP⁴	●	●	●
STEP²	●	●	●
SHARE^{1,3}	●	●	●
SHARE^{1,2}	●	●	●
SHARE^{1,1}	●	●	●

¹ HPG słuchawka
² Gdy bezprzewodowość wyłączona
³ Share z analogowym VC
⁴ Share 1.1 tylko z 1 mikrofonem

DLA CIC, ITC, ITE
 ■ Normal power
 ■ High power

RIE (Słuchawka w Uchu)

Przegląd produktów



LP/MP



HP/UP



RIE



RIE

Zakres dopasowania	Częstotliwość				Częstotliwość		Częstotliwość		Częstotliwość	
	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000	LP	MP	HP	UP	250 500 1000 2000 4000 8000	250 500 1000 2000 4000 8000
2.4 GHz bezprzewodowość					●	●	●	●		
Maks. wzm. (IEC 118-0) dB	61	67	74	82	69 ¹	74 ¹				
Maks. wyj. (IEC 118-0) dB	123	125	131	137	128 ¹	127 ¹				
Typ baterii		312		312			312			312
Żywotność baterii (średnia) h		223		223			123 ²			123 ²
Przycisk zmiany programów		●		●	●	●	●	●	●	●
Wielofunkcyjny przełącznik					●	●	●	●	●	●
Dwa mikrofony		●		●	●	●	●	●	●	●
Cewka					●	●	●	●	●	●
DAI (wejście audio)							●			●
Otwarte dopasowanie Open		●		●	●	●	●	●	●	●
CENTRO⁶		●		●						
CENTRO⁴		●		●						
STEP⁴										●
STEP²										●
SHARE^{1,3}							●			

¹ HPG słuchawka
² Gdy bezprzewodowość wyłączona
³ Brak bezprzewodowości dla Share 1.3

DLA CENTRO
 ■ Low power
 ■ Normal power
 ■ High power
 ■ Ultra power

DLA STEP I SHARE
 ■ S-Słuchawka
 ■ Normal power open
 ■ Normal power zamknięta
 ■ High power słuchawka

BTE (Za Uchem)

Przegląd produktów



Zakres dopasowania									
2.4 GHz bezprzewodowość	●	●	●	●					
Maks. wzm. (IEC 118-0)	dB	64	66	74	80	63	69	75	86
Maks. wyj. (IEC 118-0)	dB	132	134	139	139	133	133	140	144
Typ baterii		312	13	13	13	312	13	13	675
Żywotność baterii (średnia)	h	133 ¹	264 ¹	242 ¹	242 ¹	120	225	207	450
Przycisk zmiany programów		●	●	●	●	●	●	●	●
Regulator głośności			●	●	●	●	●	●	●
Dwa mikrofony		●	●	●	●	●	● ²	● ²	●
Cewka		●	●	●	●	●	●	●	●
DAI (wejście audio)		●	●	●	●	●	●	●	●
Otwarte dopasowanie Open		●	●			●			
STEP⁴		●	●	●	●				
STEP²		●	●	●	●				
GAIN³									●
GAIN²									●
SHARE^{1.3}						●	●	●	
SHARE^{1.2}							●	●	
SHARE^{1.1}							●	●	

¹ Gdy bezprzewodowość wyłączona

■ Open

² Share 1.1 tylko z 1 mikrofonem

■ Zamknięta

Przegląd funkcji

		CENTRO ⁶	CENTRO ⁴	STEP ⁴	STEP ²	GAIN ³	GAIN ²	SHARE ^{1.3}	SHARE ^{1.2}	SHARE ^{1.1}
Przetwarzanie dźwięku	Liczba kanałów	17	14	12	7	9	6	6	6	4
	Pasma regulacji wzmocnienia, w programie	9	7	7	6	6	4	6	4	4
	Programy	Do 4	Do 4	Do 4	Do 3	Do 4	Do 3	Do 4	Do 3	Do 2
	Opcjonalne Liniowe wzmocnienie	●	●			●	●			
Redukcja hałasu	Redukcja hałasu	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	Adaptacyjna	
	Redukcja szumu mikrofonu	3 opcje	2 opcje	2 opcje	●					
	Osobista redukcja hałasu	5 opcji		5 opcji						
	Adaptacyjna redukcja szumu wiatru	3 opcje	2 opcje	2 opcje	●					
Podstawowe	Opóźnione włączenie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sygnaly (Słaba bateria, VC, zmiana programu)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zrozumienie mowy	Wszechkierunkowość	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stać kierunkowość	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Kierunkowość zorientowana na mowę (adaptacyjna)	●	●	●	●	●		●		
	Auto-Sterowana kierunkowość (adaptacyjna)	●	●	●	●	●		●		
	Wybór szerokości wiązki mikrofonu	4 opcje	4 opcje	4 opcje	2 opcje					
	Auto-Sterowana szerokość wiązki mikrofonu	●	●	●						
	SoundScape technologia (przestrzenny dźwięk)	●	●	●	●					
Redukcja sprzężenia	Menedżer sprzężenia						●			
	Menedżer sprzężenia Plus	●	●	●	●	●		●	●	●
	- zawiera Strażnik Sprzężenia	●	●	●	●	●		●		
	- zawiera Tryb Muzyka	●	●	●						
	Bezpieczne dopasowanie	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Fabryczne ustawienia sprzężenia (Sztuczne Ucho)	●	●	●	●	●	●	●		
Specjalne	Made for iPhone (przesyłanie dźwięku i regulacja)	●								
	Aplikacja EasyHearing	●	●	●	●					
	Menedżer Aklimatyzacji	●								
	Dziennik aparatu	●	●	●	●	●	●	●		
	AutoTelefon	●	●	●	●	●	●	●		
	Środowiskowy regulator wzmocnienia	5 opcji	5 opcji	5 opcji	5 opcji					
	Przesunięcie częstotliwości (kompresja)	●	●			●				
	In-Situ audiometria	●	●	●	●	●	●			
2.4 GHz Bezprzewodowa łącność	Komunikacja międzyuszna Ear-To-Ear	●	●	●	●					
	- synchronizacja zmiany głośności	●	●	●	●					
	- synchronizacja zmiany programu	●	●	●	●					
	- Komfortowy Telefon	●	●	●	●					
	Klips Telefoniczny 2	●	●	●						
	TV Streamer 2	●	●	●						
	Pilot 2	●	●	●	●					
	Mini Mikrofon	●	●	●						
Interfejs programowy	Airlink 2	●	●	●	●					
	NOAH Link, Speedlink, Hi-Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oprogramowanie	Appraise (ostatnio dostępna wersja)	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2

Essential Hearing

Interton został założony w Niemczech w roku 1962. Rozwijamy i produkujemy aparaty słuchowe od ponad 50 lat, a nasze produkty sprzedawane są w ponad 70 krajach. Dziś jesteśmy częścią Grupy GN, jednej z największych na świecie organizacji, produkującej aparaty słuchowe i używamy ich sprawdzonych technologii do produkcji wysokiej klasy aparatów słuchowych. Od lat naszą filozofią jest Essential Hearing co oznacza skupienie się na niesieniu pomocy osobom z uszkodzonym słuchem, dzięki wspaniałym produktom w uczciwej cenie. Przejdź do www.interton.com aby dowiedzieć się więcej.

Pierwsza marka aparatów słuchowych z własnym kanałem telewizyjnym!

Na naszym kanale telewizyjnym Interton, możesz obejrzeć filmy o produktach, programie do dopasowania i filmy szkoleniowe w 15tu różnych językach.

Po prostu, przejdź do www.interton.tv.

Przedstawiciel:

Interton.pl | Wielicka 28 | PL-30552 Kraków

Tel: +48 12296 6424 | www.interton.com

Producent:

Interton A/S | Lautrupbjerg 7 | DK-2750 Ballerup

Tel: +45 4575 1111 | www.interton.com